

Neop | Chariots d'urgence 600 x 400 à tiroirs jointifs

Disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur* 100
- Zone de préhension ergonomique
- Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. Accès au contenu du chariot en rompant le scellé par simple torsion. Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage unique numéroté.
- 5 ou 6 tiroirs jointifs
- Planche à massage cardiaque sur support

Coloris

Rouge garance



*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

Configuration type - PREMIUM


CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ - 5 tiroirs jointifs

Accessoires périphériques

- 1 jeu de 20 scellés
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche de massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte-sérum 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

Aménagement intérieur

- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm

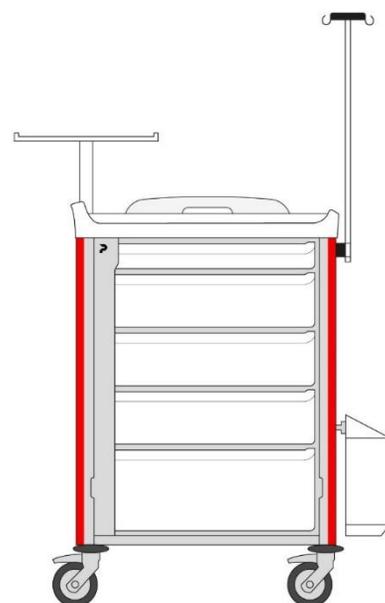

Référence	Désignation
8Y164H100P4.U2	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 - 5 tiroirs jointifs


CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ - 6 tiroirs jointifs

Accessoires périphériques

- 1 jeu de 20 scellés
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche de massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte-sérum 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

Aménagement intérieur

- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm

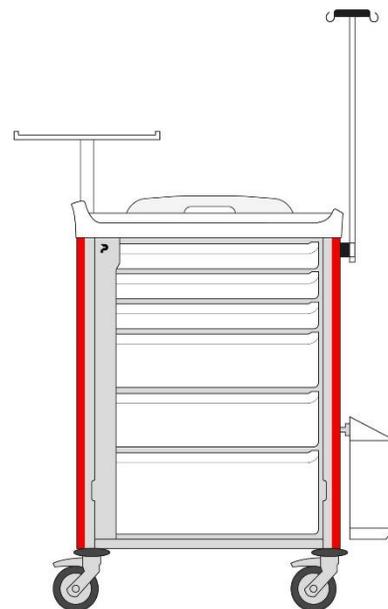

Référence	Désignation
8Y164H100P4.U3	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 - 6 tiroirs jointifs

Accessoires et aménagements intérieurs



Poignée ergonomique, portique, rail normalisé, poubelle...
Se référer aux fiches dédiées.

Données techniques

Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.

Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Fermeture	Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	24 kg
Capacité	20 pas de 40 mm
Verrouillage	Scellés

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	36 kg	Volume	1,15 m ³